



コンメド 電気メス総合カタログ

販売元



〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー12階 TEL: 03-5715-2800 FAX: 03-5715-2801
<https://www.mcmed.co.jp/>



改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
作成日：2024年4月第7版
2024_部数：1,000



CONMED SYSTEM 5000

Electrosurgical Generator

コンメド システム5000




術者のこだわりを実現するフラッグシップモデル

コンメド システム5000は、切開・凝固・バイポーラ凝固の各モード毎に幅広いバリエーションを備えた多機能電気メスです


ダイナミックレスポンスと特殊モード

SYSTEM5000にはダイナミックレスポンス機能が搭載されています。この機能には出力対象組織に応じて効果的に電流や電圧を調整するもので、安定した臨床作用を生み出すことができます。ADSP (Advanced Digital Signal Processing) 機構によって1秒間に450,000回以上の測定を行い、出力調整に活用しています。

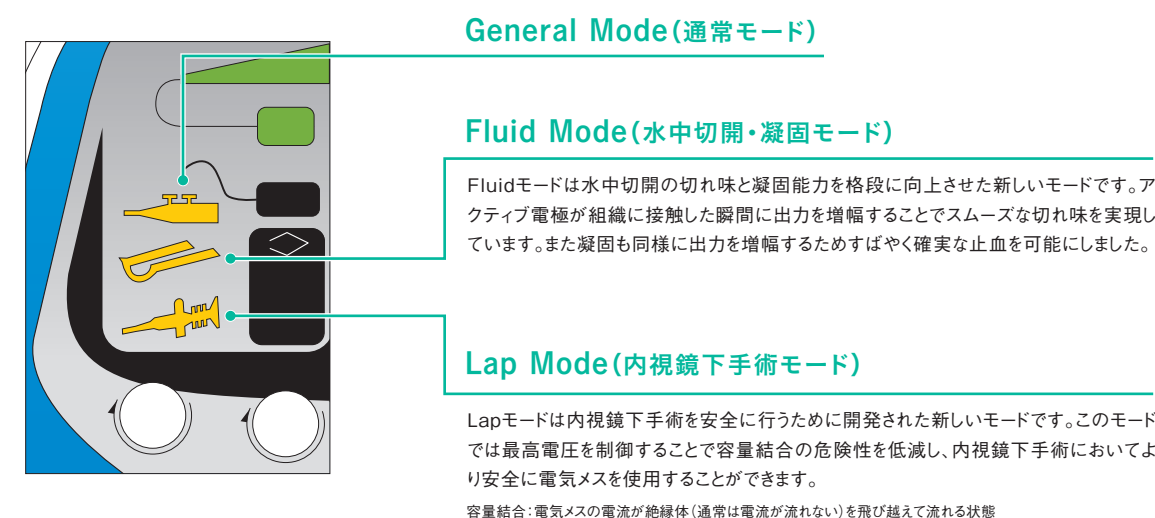

純粋切開と混合切開


切開モードは含まれる凝固能レベルで4段階あり、術式や対象組織に応じて選択いただけます。また、出力をパルス状に制御するパルスカットモードでご使用いただくことにより、一層微細な切開操作が可能になります。

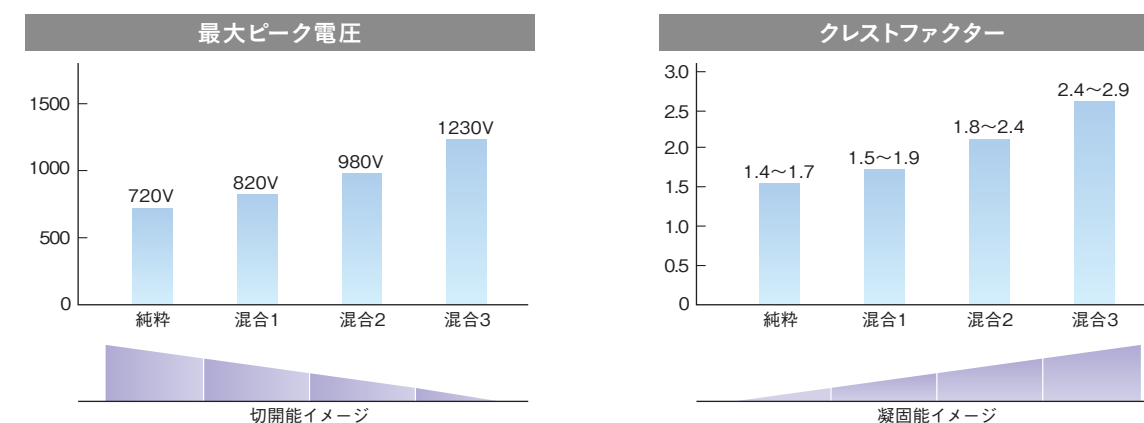


パルス凝固モード

出力をパルス状に制御することで、
従来の凝固出力よりも熱変性領域を浅く抑えることができます。
膜状組織の剥離や実質臓器の止血等、幅広い場面でご使用いただけます。


熱によって生じた壊死層の深さ（日本食品分析センター調べ）

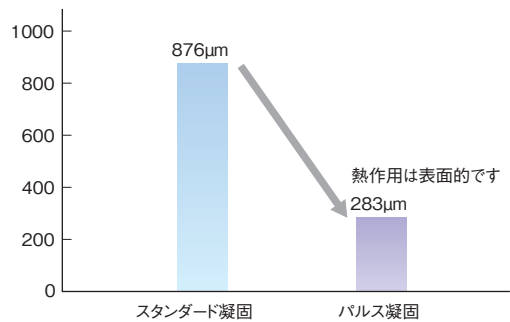

クレストファクター（社内測定）

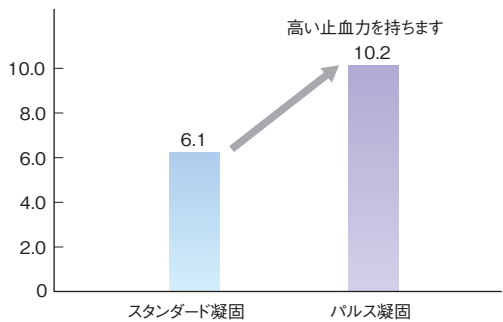

パルス凝固の出力イメージ

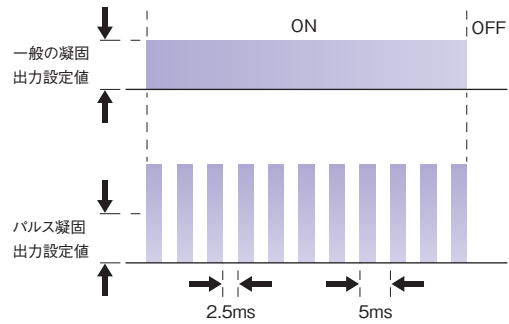

パルス凝固は凝固出力を断続的（間隔は2.5m秒動作、2.5m秒休止）に行います




スタンダード凝固 パルス凝固
米国製造元における、凝固出力後の組織写真

ピンポイント凝固

最大電圧を低く抑え、周囲への熱拡散を防ぎます。
血管に隣接した部位の止血や、微細な剥離操作時に効果を発揮します。

最大ピーク電圧

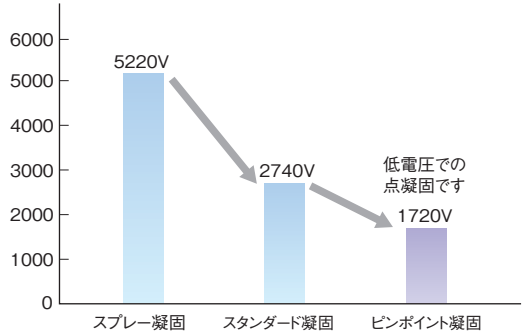


バイポーラ凝固

■マイクロバイポーラ

微細な止血に最適な出力特性を採用し
炭化を最小限に抑えた凝固を行うことが可能です。


2種類のバイポーラ凝固（出力ロードカーブ模式図）

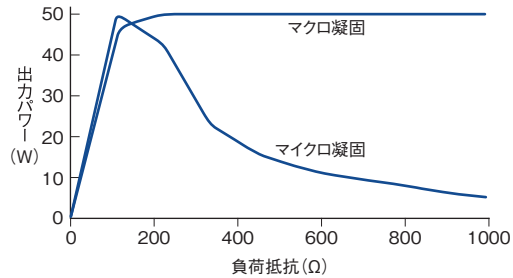

■マクロバイポーラ

モノポーラ凝固に近い出力特性を採用することで強力なバイポーラ凝固を実現しました。
腹腔鏡下手術用のバイポーラアクセサリに最適なモードです。

出力形式による作用（模式図）

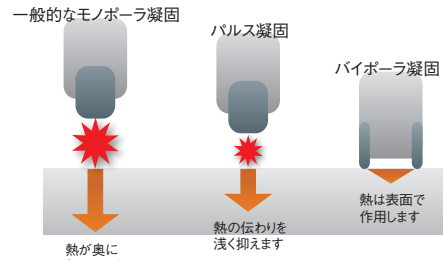

販売名:コンメド システム5000
医療機器承認番号:22000BZX01594000

コンメド システム5000 仕様

本体サイズ	(高さ)140mm×(幅)350mm×(奥行き)480mm (背面のハンドルを含む)	出力方式	高周波非接地形(フローティング形)
本体重量	9.75kg	冷却方式	ファン放熱型(内部温度により2段階)
使用電源	100VAC、50/60Hz	電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器
電流	最大入力時 純粋切開6.2A	電撃に対する保護の程度	CF形装着部
消費電力	620VA	安全機構	ARM(オートマッチングリターンモニター)対極板接触不良モニター 対極板コード異常アラーム 自己診断機能、電圧制御機能
高周波漏れ電流	100mA以下 (IEC60601-2-2:1998, Clause 19.3.101bに準拠)		

モード	最大電力 (W)	定格負荷 (Ω)	クレストファクター	最大開回路電圧 (ピーク)	搬送周波数 (KHz)※
モノポーラ					
純粋切開	300	500	1.4-1.7	720	391
混合切開1	200	500	1.5-1.9	820	391
混合切開2	200	500	1.8-2.4	980	391
混合切開3	200	500	2.4-2.9	1230	391
ピンポイント凝固	120	500	3.7-4.6	1720	391
スタンダード凝固	120	500	5.6-6.6	2740	562
スプレー凝固	80	500	7.1-9.7	5220	562
バイポーラ					
マイクロ凝固	50	50	1.5-1.9	160	391
マクロ凝固	90	300	1.6-2.0	540	391

ORDERING INFORMATION

カタログ番号	製品名
60-8005-002	コンメド システム5000
60-8040-001	システム5000/2500専用カート
60-6700-001	コンメド モノポーラフットスイッチ
60-5103-001	バイポーラフットスイッチ

※カートサイズ: (高さ)840mm×(幅)370mm×(奥行き)600mm

オプション品
製品名:ユニバーサルアダプター
医療機器承認番号:15400BZY01796000



CONMED SYSTEM 2450

Electrosurgical Generator

コンメド システム2450




洗練された基本性能と使いやすさの両立

コンメド システム2450はこだわりの各出力モードで術者のニーズに、そしてシンプルなパネルデザインで操作される方のニーズにお応えします。



ダイナミック レスポンス

様々に変化する対象組織に応じて、常に一定の出力を維持する機能「ダイナミック レスポンス」。米国製造元での試験では、他社既存製品を大きく上回るパフォーマンスが確認されており、ストレスの無い切開と均一な凝固層形成を実現します。

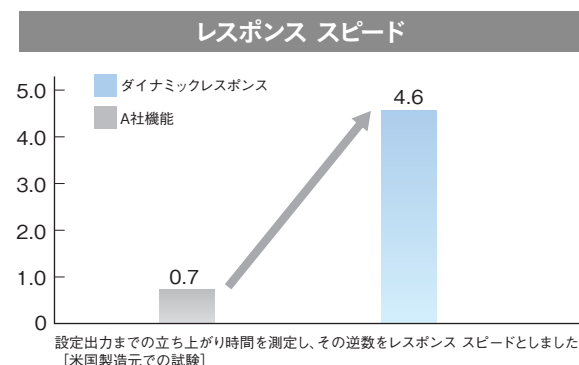


高い止血指数のモノポーラ凝固モード

凝固機能ではスタンダード凝固、スプレー凝固を搭載。
ともに高いクレストファクター※(止血指数)を持ち、効率のよい凝固を実現します。

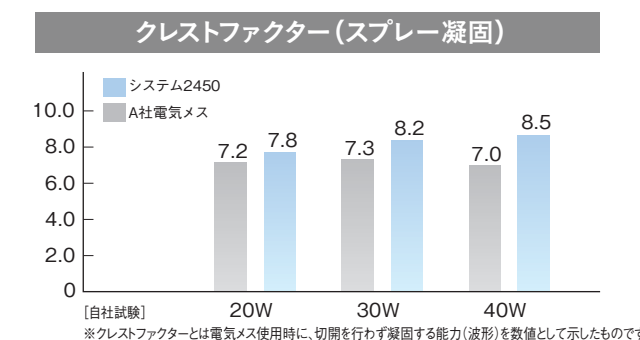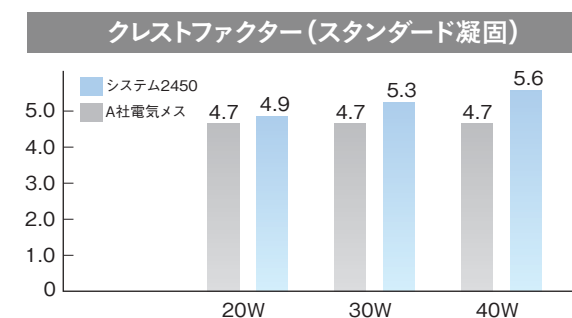

使いわけのできるバイポーラ凝固モード

バイポーラ凝固モードの出力は周辺組織の熱損傷を最小限まで抑えるように設計されている「マイクロモード」、強力な止血力を持つ「マクロモード」の2種から選択できます。それぞれの臨床場面に応じた使いわけが可能です。

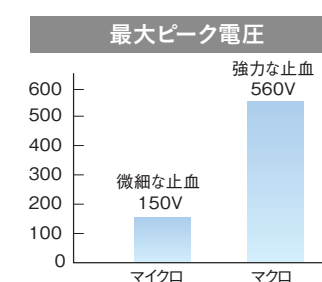

使いやすさを支える各機能

- **フロントパネルコントロール**
全てのコントロールがフロントパネル上で可能です。
- **オートマチックリターンモニター**
デュアルタイプの対極板使用時に、患者さんと対極板の接触を監視するモニター。熱傷事故を未然に防ぐことができます。
- **メモリーセッティング**
前回出力を記憶する機能。設定変更の手間を省きます。

コンメド システム2450 仕様

販売名:コンメド システム2450
医療機器認証番号:222AABZX00041000

本体サイズ	(高さ)180mm×(幅)370mm×(奥行き)480mm (背面のハンドルを含む)	出力方式	高周波非接地形(フローティング形)
本体重量	14.5kg	冷却方式	自然放熱型
使用電源	100VAC 50/60Hz	電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器
電流	最大入力時 純粋切開8.4A	電撃に対する保護の程度	CF形装着部
消費電力	840VA	安全機構	ARM(オートマチックリターンモニター) 対極板コード異常アラーム 自己診断機能
高周波漏れ電流	モノポーラ100mA未満、バイポーラ59mA未満		

出力モード	最大出力(W)	最大開放電圧(V)	定格負荷(Ω)	クレストファクター(50W時)
純粋切開	300	1100	500	1.4-2.0
混合切開	200	1200	500	2.0-2.6
スタンダード凝固	120	3200	500	5.6-6.6
スプレー凝固	80	4400	500	7.5-9.5
バイポーラマイクロ凝固	70	150	50	1.4-2.0
バイポーラマクロ凝固	70	560	300	1.4-2.0

※クレストファクターとは電気メス使用時に、切開を行わず凝固する能力(波形)を数値として示したものです。

ORDERING INFORMATION

カタログ番号	製品名
60-2450-100	コンメド システム2450
CART-01	手術器械用カート タイプ1
60-6700-001	コンメド モノポーラフットスイッチ
60-5103-001	バイポーラフットスイッチ
60-6790-001	ユニバーサルアダプター(オプション品)

オプション品
製品名:ユニバーサルアダプター
医療機器承認番号:15400BZY01796000



電気メス

CONMED HelixAR™

Electrosurgical Generator +ABC

コンメド ヒーリックスAR

あらゆる外科手術に 対応可能なABC® 一体型電気メス

HelixAR™は、専門的なモードを搭載した優れた電気メスであり、コンメドのABC®テクノロジーにより、腹腔鏡手術及び開腹手術両方に合わせた特長を持っています。



MONOPOLAR SPECIALTY MODES

■Lap

Lapモードでは電圧を2700ボルトに制限し、容量結合※1の危険性を低減し、腹腔鏡下手術においてより安全に電気メスを使用することができます。


※1容量結合：電気メスの電流が絶縁体（通常は電流が流れない）を飛び越えて流れる状態

■Fluids

Fluidsモードは液中切開の切れ味と凝固能力を向上させたモードです。

■パルス凝固

出力をパルス状に制御することで、従来の凝固出力よりも熱変性領域を浅く抑えることができます。膜状組織の剥離や実質臓器の止血等、幅広い場面でご使用いただけます。

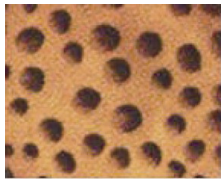

ABC®凝固



スプレー凝固

ABC® MODES

■Pulse Argon

組織表面の微細な出血に対して、4種類の異なるパルス状の出力機能にて凝固を最小限に抑え、止血を制御できます。



スリムなボディ

取っ手も大きく、持ち運びしやすいデザイン

背面にアルゴンガスボンベ2本格納が可能

BENEFITS OF ABC® TECHNOLOGY

迅速で、表層への高い止血効果

アルゴンガスの吹付けにより血液を除去するABC®凝固は、標的組織に対し直接的に高周波電流を作用するため、高い止血効果が得られ、出血の減少、手術時間の短縮、炭化の低減につながります。

最小限の組織損傷

ABC®凝固は、高周波電流がイオン化したアルゴンガス中を拡散しながら組織に到達する為、スプレー凝固より低温となり、1点に集中することがなく浅い焼痂を形成します。※2

手術部位の視野確保

凝固中に発生するサージカルスモークを除去することを助け、不快な臭いを低減する効果があります。

※2 PJW Vercro, Case Report and Clinical Technique: Argon Beam Electrosurgery for Tissue Ties and Maxillary Frenectomies in Infants and Children. 2012

その他アクセサリ

130344



134003



130345



160656



160655



133023



7-382



7-383



コンメド HelixARシステム 仕様


販売名:コンメド ヒーリックスAR
医療機器認証番号:301ALBZX00018000

本体サイズ	(高さ)121cm × (幅)62cm × (奥行き)83cm	出力方式	高周波非接地形(フローティング形)
本体重量	48.5kg	冷却方式	自然放熱型(ファンなし)
使用電源	100V、50/60Hz	電撃に対する保護の形式	クラスⅠ 機器
電流	最大入力時 6.4A	電撃に対する保護の程度	CF形機器
消費電力	640W Max	安全回路	ARM(オートマチックリターンモニター) 対極板接触不良モニター アルゴンガス供給圧アラーム(250psi± 10%) 対極板コード異常アラーム
高周波漏れ電流	100mA以下:IEC60601-2-2準拠		

カタログ番号	製品名	梱包単位	医療機器承認/認証/届出番号
60-8800-001	HELIXARシステム 本体	1	
60-8432-001	HELIXARシステム カート	1	301ALBZX00018000
60-8475-001	ABCフットスイッチ	1	
60-6700-001	コンメドモノポラフットスイッチ	1	22000BZX01594000
60-5103-001	バイポーラフットスイッチ	1	21200BZY00506000
136050	アルゴンガスボンベ	1	—
130345	ABCハンドピース(45°アングルタイプ)	1	
130321	ABCハンドピース(トリプルオプション)	1	20400BZY00570000
130344	ABCハンドピース(ハンドコントロール)	1	
130342	ABCハンドピース(ラバロスコープ用10mm)	1	
160655	ABCハンドピース(ラバロスコープ用5mm)	1	20400BZY00571000
160656	ABCハンドピース(ラバロスコープ用ハンドコントロール)	1	
134003	ABCハンドピース(フレキシブルタイプ7.6cm)	1	
134006	ABCハンドピース(フレキシブルタイプ15.2cm)	1	20400BZY00570000
134009	ABCハンドピース(フレキシブルタイプ22.8cm)	1	
133023	ABC GIブローブ(軟性鏡専用2.3mm×220cm)	1	21200BZY00505000
133000	GIブローブ延長アダプタ(133023専用)	1	27B1X00116000228
7-382	サーモガード(プラスABC/デュアルパッド)	10	
7-383	サーモガード(プラスABC/デュアル小児用)	10	226ADBZX00205000


Electrosurgical Pencils

ディスポーザブル ゴールドライン ペンシル
ウルトラクリーン コーティングメス先電極

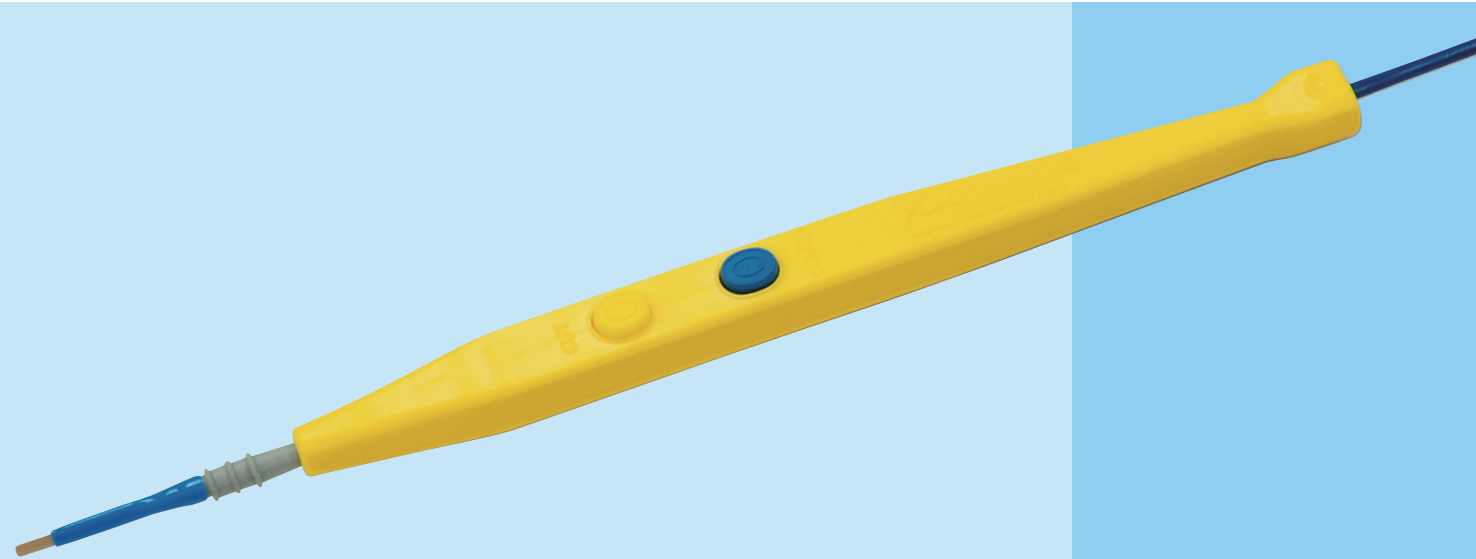

難燃性テフロン素材の絶縁メス先一体型ペンシル
確実な操作を実現する信頼の安全設計

特長

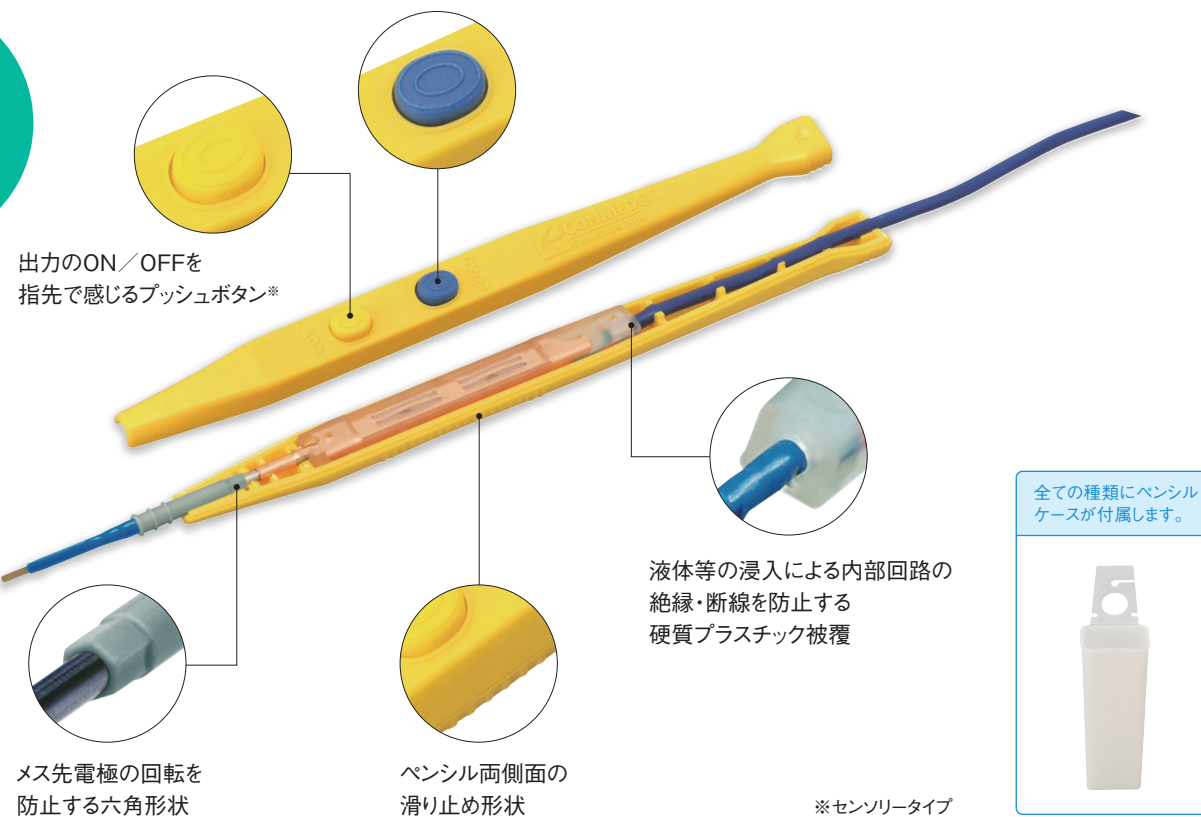


ゴールドライン/ウルトラクリーン コーティング メス先電極付ペンシル
(コーティングメス先電極、ケース付) コード長:3.05m

販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
医療機器承認番号:20300BZY01003000

139114A
センソリータイプ



131309A
センソリータイプ

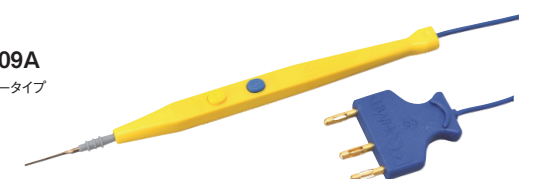

131307A
ロッカータイプ



ウルトラクリーン コーティング メス先電極

販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
医療機器承認番号:20300BZY01003000

カタログ番号	製品名	包装単位
139114A	ディスポーザブルコントロールペンシル(コーティング絶縁メス先電極:139104EXT付)	20入
131309A	ディスポーザブルコントロールペンシル(コーティングメス先電極:139100付)	20入
131307A	ディスポーザブルコントロールペンシル(コーティングメス先電極:139100付)	20入


ゴールドラインペンシル
(ディスポーザブルメス先電極、ケース付) コード長:3.05m

販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
医療機器承認番号:20300BZY01003000

138114A
センソリータイプ



130309A
センソリータイプ

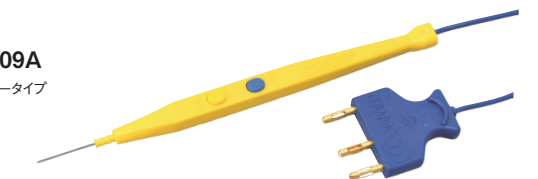

130307A
ロッカータイプ



138659A



カタログ番号	製品名	包装単位
138114A	ディスポーザブルコントロールペンシル(絶縁メス先電極:138104付)	20入
130309A	ディスポーザブルコントロールペンシル(メス先電極:138101付)	20入
130307A	ディスポーザブルコントロールペンシル(メス先電極:138101付)	20入
138659A	ディスポーザブルフットコントロールペンシル(メス先電極:138101付)	20入
130326A	センソリーコントロールペンシル4.5(メス先電極:138101付) ※4.5mコード付	20入


ペンシル／メス先電極

Electrosurgical Pencils

ディスポーザブル ゴールドライン ペンシル
ウルトラクリーン コーティングメス先電極

ディスポーザブル メス先電極 ※写真は実物大です

販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
医療機器承認番号:20300BZY01003000

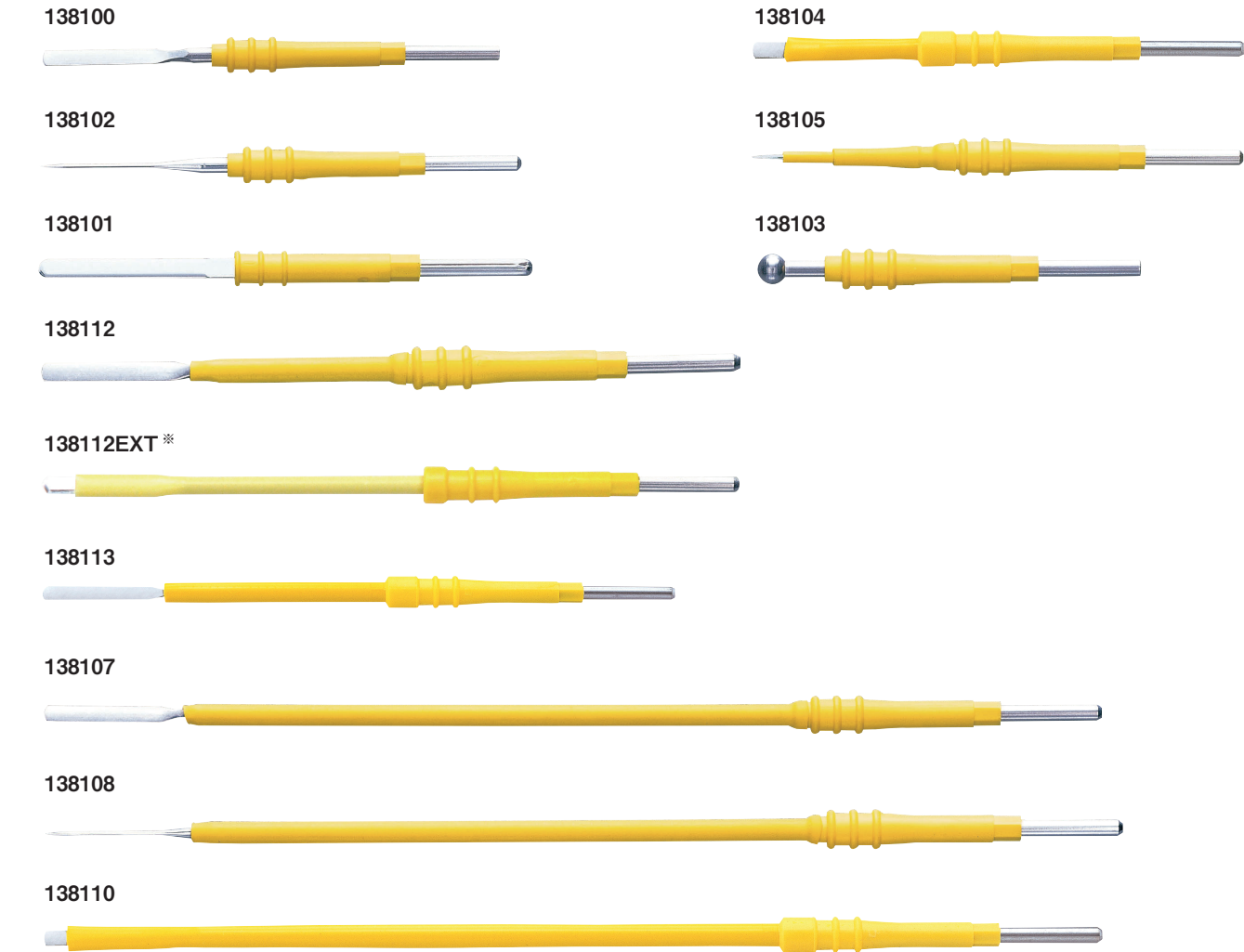

カタログ番号	製品名	包装単位	医療機器承認 / 認証番号
138100	ディスポーザブルメス先電極(ブレード(ヘビータイプ))	10入	20300BZY01003000
138104	ディスポーザブルメス先電極(ブレード絶縁タイプ)	10入	
138102	ディスポーザブルメス先電極(ニードル)	10入	
138105	ディスポーザブルメス先電極(ニードル絶縁タイプ)	10入	
138101	ディスポーザブルメス先電極(ブレード)	10入	
138103	ディスポーザブルメス先電極(ボール4mm)	10入	
138112	ディスポーザブルメス先電極(エクステンブレード10cm)	10入	221AGBZX00294000
138112EXT※	ディスポーザブルメス先電極(エクステンブレード絶縁タイプ10cm)	10入	
138113	ディスポーザブルメス先電極(エクステンブレード9cm)	10入	20300BZY01003000
138107	ディスポーザブルメス先電極(エクステンブレード15cm(6in))	10入	
138108	ディスポーザブルメス先電極(エクステンニードル15cm(6in))	10入	
138110	ディスポーザブルメス先電極(エクステンブレード絶縁タイプ15cm(6in))	10入	

※販売名:ディスポーザブル アクティブ電極
医療機器認証番号:221AGBZX00294000
製造販売元:株式会社セムコ

ディスポーザブル メス先電極 婦人科用 ※写真は実物大です

販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
医療機器承認番号:20300BZY01003000



カタログ番号	製品名	包装単位
60-5180-101	ディスポーザブルメス先電極(ループ電極 T-style(12×8mm) 10.7cm)	5入
60-5180-102	ディスポーザブルメス先電極(ループ電極 T-style(15×10mm) 11cm)	5入
60-5180-104	ディスポーザブルメス先電極(ループ電極 T-style(20×10mm) 11cm)	5入
60-5181-102	ディスポーザブルメス先電極(ボール電極(3mm) 10cm)	5入
60-5181-103	ディスポーザブルメス先電極(ボール電極(5mm) 10cm)	5入

Electrosurgical Pencils


ディスポーザブル ゴールドライン ペンシル
ウルトラクリーン コーティングメス先電極

ウルトラクリーン コーティング メス先電極 ※写真は実物大です

販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
医療機器承認番号:20300BZY01003000

特長

- 組織の付着を軽減するシリコンコーティング
- 湿らせたスポンジ、ガーゼ等にて簡便に付着物の除去が可能
- 柔軟性のあるシリコンコーティングによりメス先を曲げて使用可能
(メス先電極を曲げて使用する場合は、添付文書の記載に従ってください。)

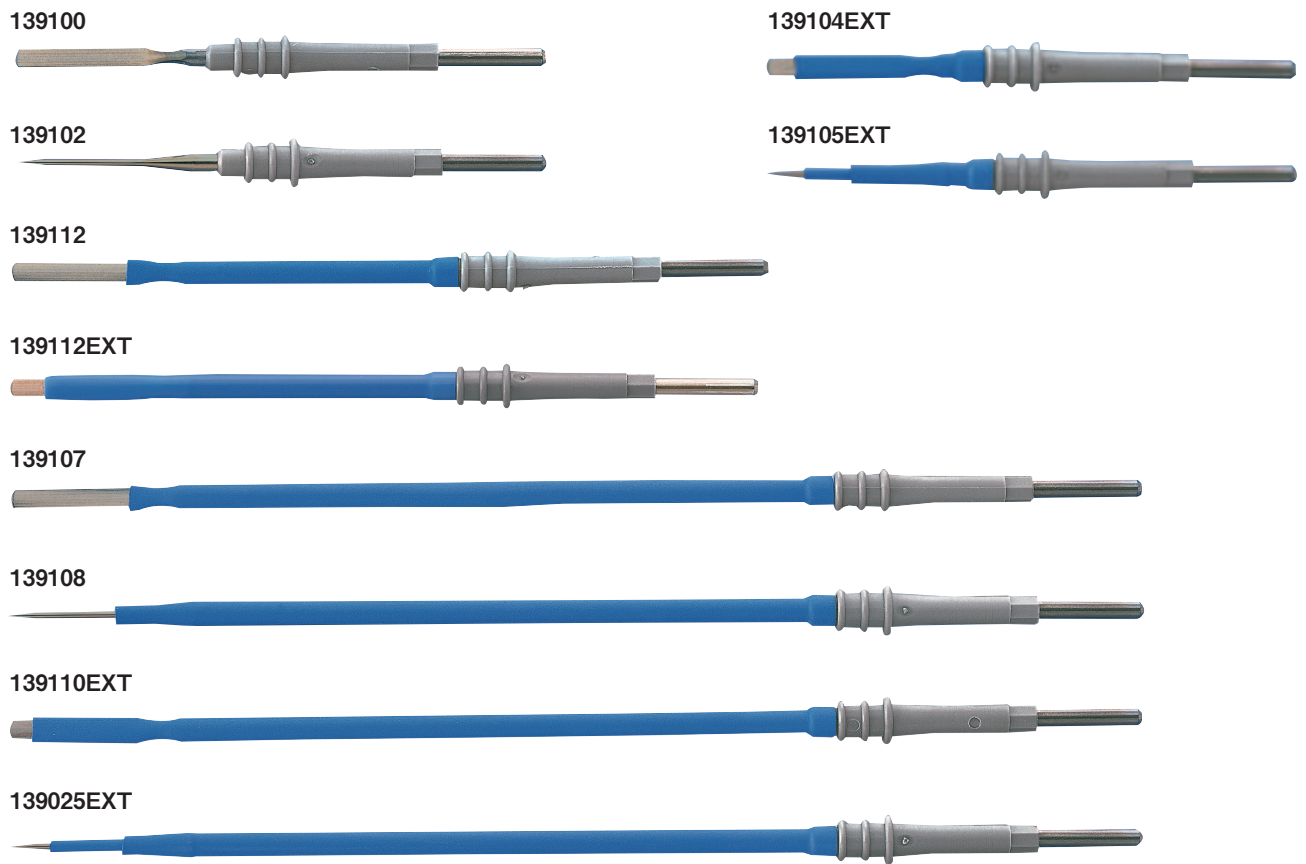

カタログ番号	製品名	包装単位
139100	コーティングメス先電極 (ブレード〈ヘビータイプ〉)	10入
139104EXT	コーティングメス先電極 (ブレード絶縁タイプ)	10入
139102	コーティングメス先電極 (ニードル)	10入
139105EXT	コーティングメス先電極 (ニードル絶縁タイプ)	10入
139112	コーティングメス先電極 (エクステンドブレード10cm)	10入
139112EXT	コーティングメス先電極 (エクステンドブレード絶縁タイプ10cm)	10入
139107	コーティングメス先電極 (エクステンドブレード15cm)	10入
139108	コーティングメス先電極 (エクステンドニードル15cm)	10入
139110EXT	コーティングメス先電極 (エクステンドブレード絶縁タイプ15cm)	10入
139025EXT	コーティングメス先電極 (エクステンドニードル絶縁タイプ15cm)	10入

Laparoscopic Electrode & Accessories

内視鏡外科用メス先電極

販売名:コンメド ラパロスコピック 電極
医療機器承認番号:21400BZY00252000
製造販売元:コンメド・ジャパン株式会社

特長

- コンメドペンシルに接続するラパロ用32cmの電極
- 電極部を付け替えるだけでラパロ用電極のハンドスイッチ化が可能
- HEX-HUBにより先端の回転を防止 (コンメドペンシルとの接続に限る)
- 先端部のメジャーで0.5cm刻みで計測が可能



カタログ番号	製品名	包装単位	規格
60-5159-001	スパチュラー メジャー 電極	5入	32cm ペンシル用
60-5163-001	Lフック メジャー 電極	5入	32cm ペンシル用
60-5164-001	Jフック メジャー 電極	5入	32cm ペンシル用

ペンシルアダプター／出力用ケーブル

販売名:ソリッドステート電気手術器MF360A型
医療機器承認番号:15400BZY01796000

60-0823-001



60-6790-001



60-5169-001



カ タ ロ グ 番 号	製 品 名	包 装 単 位	規 格
60-0823-001	フットコントロールペンシル用アダプタ	1入	138659A用
60-6790-001	ユニバーサルアダプタ	1入	汎用 内径6mm
60-5169-001	ラパロ鉗子用出力ケーブル	1入	汎用

ディスポーザブルペンシルケース

販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
医療機器承認番号:20300BZY01003000



カタログ番号	製品名	包装単位	規格
137668	ディスポーザブルペンシルケース	10入	汎用

Electrosurgical Pencils

コンメド マイクロニードル電極

販売名：マイクロニードル電極
医療機器認証番号：303AABZX00044000

特長

- 素材には、耐熱性に優れたタングステンを使用しております。
- 超極細な先端形状は、電流密度を高くし、低出力でも組織の切開又は凝固を可能にするデザインです。
- 低出力ですので、組織周囲への熱影響を抑える効果が期待できます。
- 滑り止め形状をしており、血液や体液等で濡れた手袋でもメス先の付け替えを可能にするデザインです。


138505-10




138506-10



※写真は実物大です

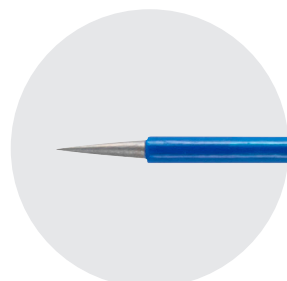

先端形状

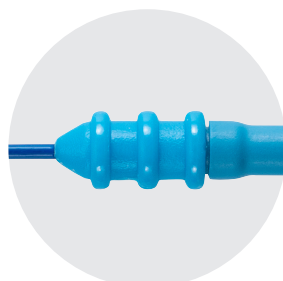

滑り止め形状

カタログ番号	製品名	包装単位
138505-10	コンメドマイクロニードル電極(ストレート3cm)	10入
138506-10	コンメドマイクロニードル電極(ストレート4cm)	10入

コンメド ディスポーザブルペンシル
バリューブルー（メス先電極、ケース付）

販売名：ハンドコントロールプラス(VB)
医療機器認証番号：231AABZX00031000

特長

- センソリータイプとロッカータイプがあります。
- メス先電極はコーティング付もあります。※
※カタログ番号：130403・130405



カタログ番号	製品名	包装単位
130402	バリューブルー（センソリータイプ・メス先電極付）	25入
130403	バリューブルー（センソリータイプ・コーティングメス先電極付）	25入
130404	バリューブルー（ロッカータイプ・メス先電極付）	25入
130405	バリューブルー（ロッカータイプ・コーティングメス先電極付）	25入

Disposable Grounding Pad

ディスポーザブル対極板

豊富な製品バリエーションで多様なニーズにお応えします


- 高含水ゲルにより皮膚への刺激を抑えたサーモガード
- 成人・小児兼用で使用でき、コンパクトで操作性に優れるシュアフィット
- 乳幼児や新生児／低体重児まで対応できるマクロライト

サーモガード ThermoGard

販売名：コンメド サーモガード
医療機器認証番号：226ADBZX00205000

水分を多量に含んだゲルは、皮膚への刺激が少ないだけでなく、皮膚表面の凹凸にもしっかりと密着して、温度上昇も抑制します。高い電圧を持つABC(Argon Beam Coagulator)に対応するタイプも取り揃えています。

51-7310

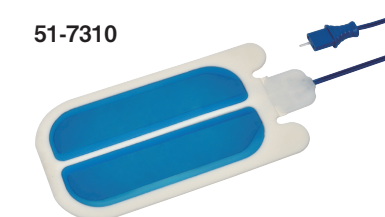

デュアルタイプ

カタログ番号	製品名	面積(cm ²)	リード線	適用体重	包装単位
51-7310	サーモガード 大人用(デュアルタイプ)	122	3.05m	15kg以上	10
51-7410*	サーモガード 大人用 リード線無し(デュアルタイプ)	122	—	15kg以上	10
51-7710	サーモガード 小児用(デュアルタイプ)	63	3.05m	5-15kg	10

※コンメド社リード線(T229)が対応します。

プラスABC デュアルタイプ

カタログ番号	製品名	面積(cm ²)	リード線	適用体重	包装単位
7-382	サーモガードプラスABC 大人用(デュアルタイプ)	122	3.05m	15kg以上	10
7-383	サーモガードプラスABC 小児用(デュアルタイプ)	63	3.05m	5-15kg	10


Disposable Grounding Pad

ディスポーザブル対極板

シュアフィット SureFit

販売名：コンメド シングルユース 対極板
医療機器認証番号：304AFBZX00084000

- 特長**
- 乳幼児から成人まで、共用で使用できるコンパクトな対極板です。
 - *1対極板パッド素材を不織布から、ウレタンフォーム素材に変更したことで、パッド部の段差を無くし、肌に密着させやすくなりました。
 - *2パッド部を覆うライナー紙の仕様を変更したことで、剥がしやすくなりました。
 - *3コードの巻き方を束ねる形からラウンド形状にしたので、使用時にストレートになりスムーズにご使用いただけるようになりました。
 - *4パッケージを薄く・軽くしたことで、開封しやすい設計となっております。

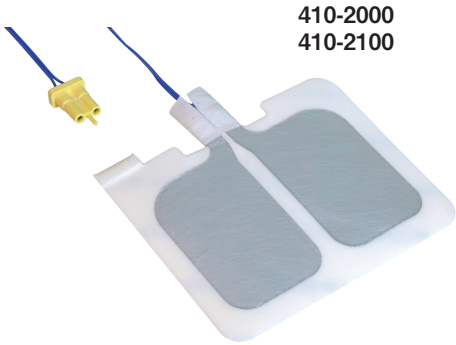


410-2000
410-2100



410-2200

*3：ゆる巻きコード

*1：ウレタンフォーム素材

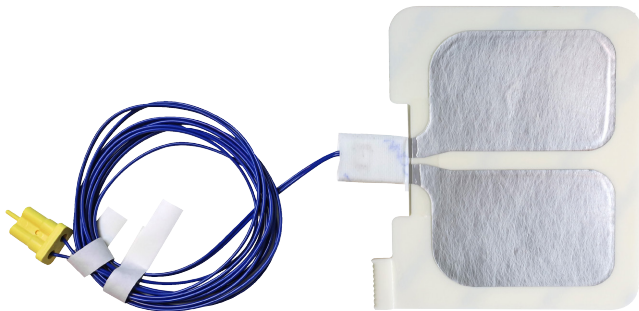

*2：剥がしやすいライナー紙

*4：開封しやすいパッケージ



デュアルタイプ


カタログ番号	製品名	面積 (cm ²)	リード線	適用体重	包装単位
410-2000	シュアフィット (デュアルタイプ)	98	3.05m	2.2kg以上	25
410-2100	シュアフィット 4.5M (デュアルタイプ)	98	4.5m	2.2kg以上	25
410-2200*	シュアフィット リード線無し (デュアルタイプ)	98	—	2.2kg以上	100

※コンメド社リード線 (T229) が対応します。
※現行品在庫終了まで
販売名：コンメド ディスポーザブル 対極板
医療機器承認番号：15900BZY00999000

マクロライト MacroLyte

販売名：コンメド シングルユース 対極板
医療機器認証番号：304AFBZX00084000

長い導電辺縁部で電流を拡散し、安全に回収します。乳幼児や新生児／低体重児まで対応できる豊富な製品バリエーションで、どのような患者にも最適な製品を選択いただけます。

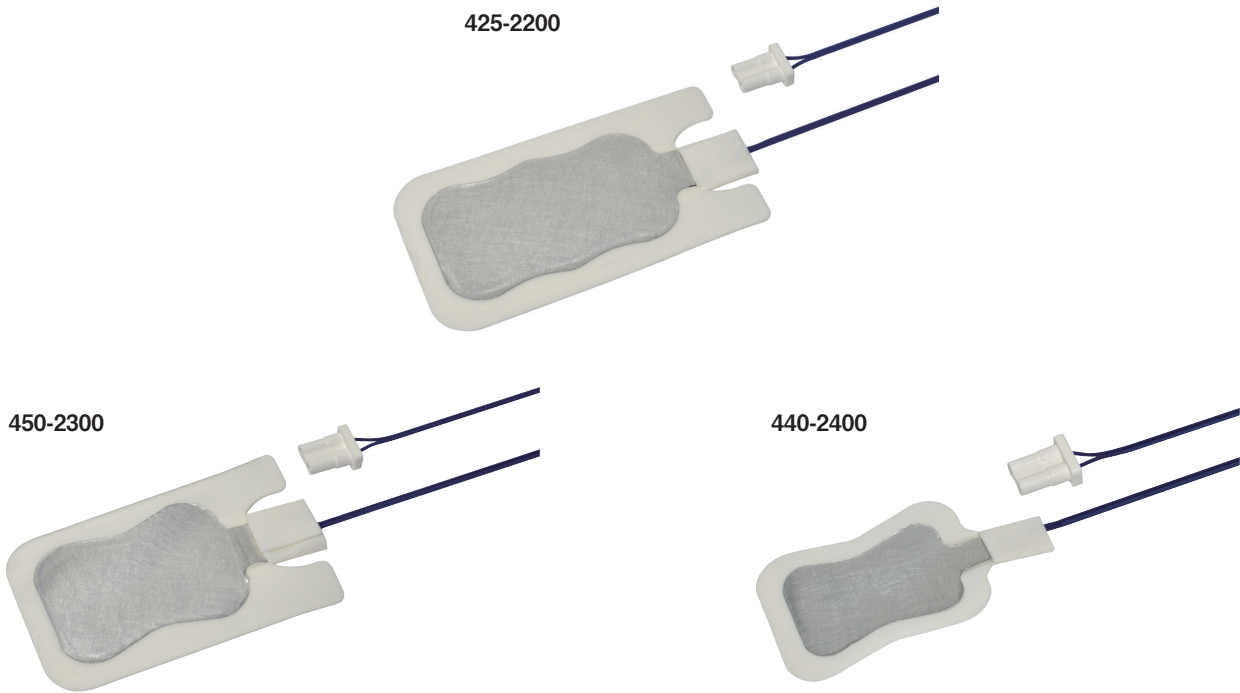

シングルタイプ

カタログ番号	製品名	面積 (cm ²)	リード線	適用体重	包装単位
425-2200	マクロライト 小児用 (シングルタイプ)	72	3.05m	5-15kg	25
450-2300	マクロライト乳幼児用 (シングルタイプ)	57	3.05m	5-15kg	15
440-2400	マクロライト 新生児/低体重児用 (シングルタイプ)	28	3.05m	5kg以下	10

※現行品在庫終了まで
販売名：コンメド ディスポーザブル 対極板
医療機器承認番号：15900BZY00999000

対極板用付属品

医療機器承認番号：15400BZY01796000

対極板用アダプター

カタログ番号	適合機種	包装単位
B204	バリラプ (SSタイプ)	1
B260	オリンパス (UES20タイプ)	1

対極板用リード線

カタログ番号	適合機種	リード線	包装単位
T229	汎用タイプ (デュアル用)	3.05m	1


バイポーラフォーセプス

BIPOLAR FORCEPS

バイポーラフォーセプス

フットコントロールタイプ

販売名:コンメド バイポーラ フォーセプス
医療機器承認番号:15900BZY00287000

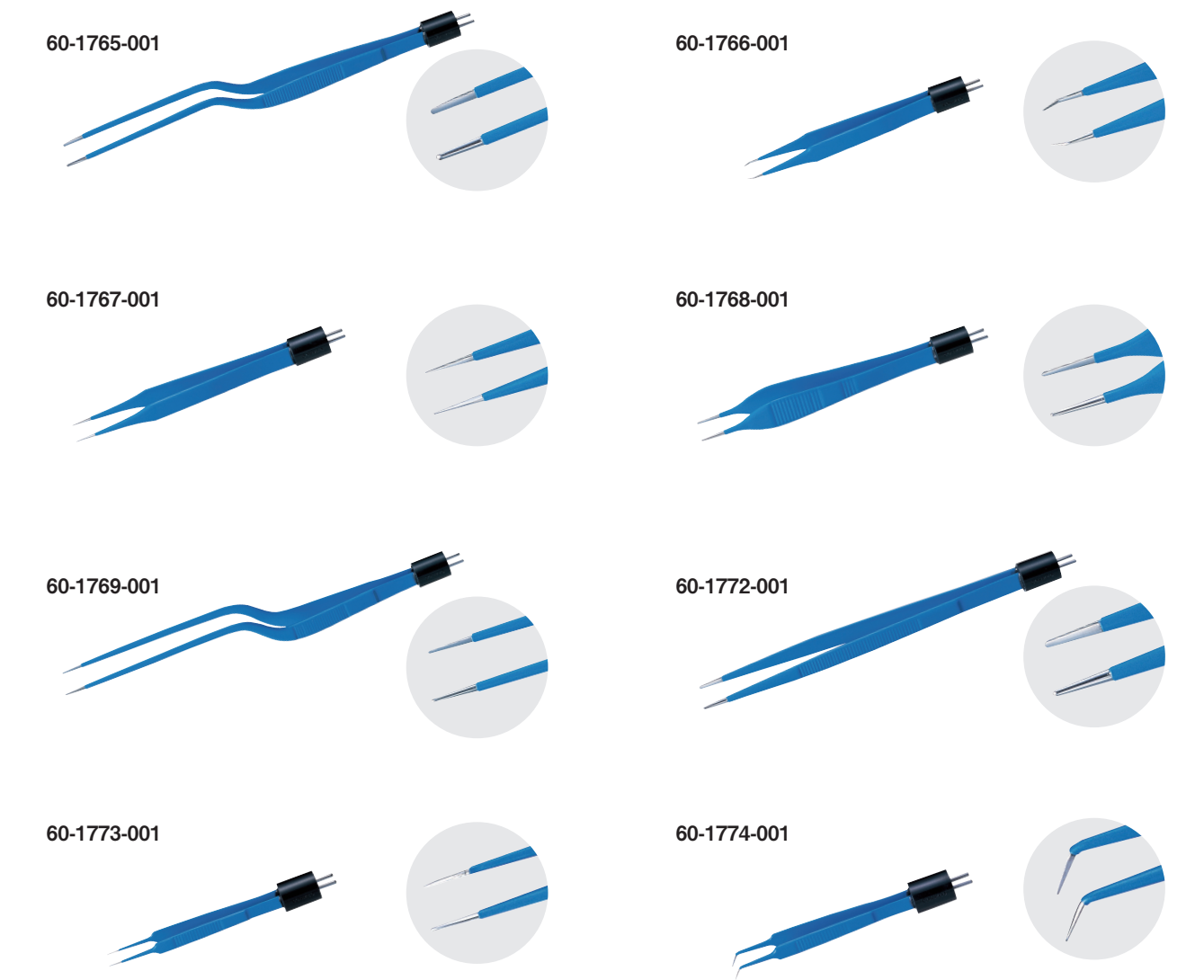


カタログ番号	製品名	全長	先端	包装単位
60-1765-001	バイポーラフォーセプス(グリーンウッドバイオネット)	20cm	1.5mm	1入
60-1766-001	バイポーラフォーセプス(ジュエラーマイクロカーブ)	11cm	0.4mm	1入
60-1767-001	バイポーラフォーセプス(ジュエラーマイクロストレート)	11cm	0.4mm	1入
60-1768-001	バイポーラフォーセプス(アドソンストレート)	12cm	1.0mm	1入
60-1769-001	バイポーラフォーセプス(クッシングバイオネットマイクロ)	19cm	0.7mm	1入
60-1772-001	バイポーラフォーセプス(セムケンストレート)	15cm	1.5mm	1入
60-1773-001	バイポーラフォーセプス(アイリスストレート)	9cm	0.4mm	1入
60-1774-001	バイポーラフォーセプス(アイリス)	9cm	0.4mm	1入

バイポーラフォーセプスは全て絶縁タイプです。

ハンドコントロールタイプ

販売名:コンメド バイポーラ フォーセプス
医療機器承認番号:15900BZY00287000

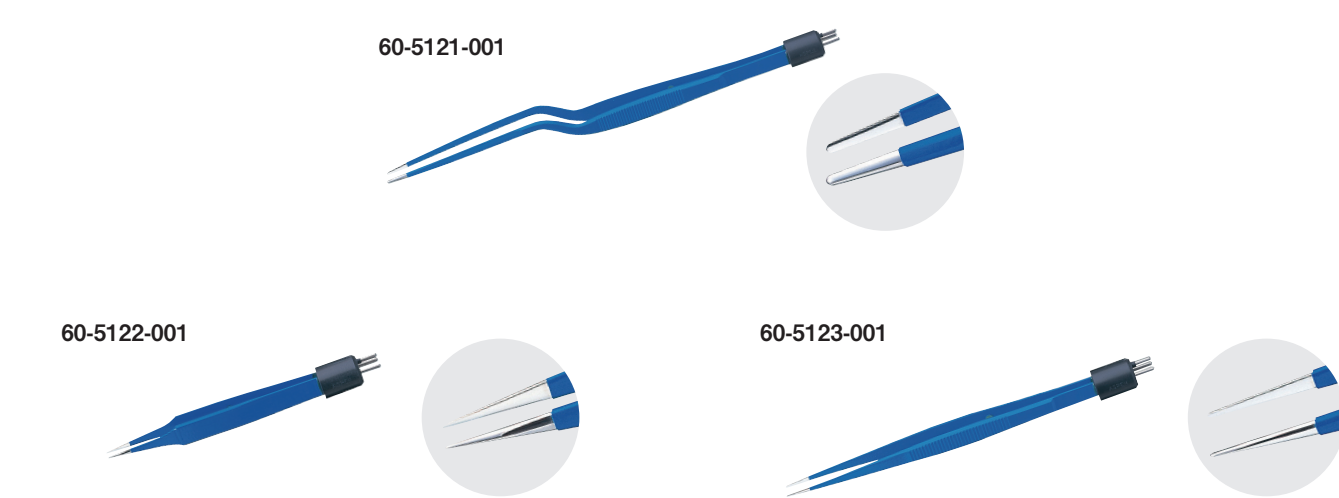

カタログ番号	製品名	全長	先端	包装単位
60-5121-001	バイポーラフォーセプス(グリーンウッドバイオネット)	20cm	1.5mm	1入
60-5122-001	バイポーラフォーセプス(ジュエラーマイクロストレート)	10cm	0.4mm	1入
60-5123-001	バイポーラフォーセプス(セムケンマイクロ)	14cm	0.7mm	1入

バイポーラフォーセプスは全て絶縁タイプです。

専用コード (フットコントロールタイプ)

販売名:リユーズブル バイポーラフォーセプス用コード
医療機器届出番号:27B1X00116000243

専用コード (ハンドコントロールタイプ)

販売名:コンメド バイポーラ フォーセプス
医療機器承認番号:15900BZY00287000



カタログ番号	製品名	包装単位
60-8046-001	リユーズブル バイポーラコード(システム5000・システム2450・セーバージェネシス用)	1入
60-5130-001	ハンドコントロールバイポーラ専用コード(システム7550ABC)	1入
60-5132-001*	ハンドコントロールバイポーラ専用コード(システム5000・システム2450・セーバージェネシス用)	1入

※受注発注品

